

**\*\*UPORABNIŠKI PRIROČNIK – SLO\*\***

**IN 26796 Infrardeča LED svetilka s stojalom inSPORTline Elbasan**



**\*\*Pridržujemo si pravico do sprememb in izboljšav svojih izdelkov brez predhodnega obvestila. Obiščite našo spletno stran [www.insportline.si](http://www.insportline.si), kjer boste našli najnovejšo različico priročnika.\*\***

**\*\*VARNOSTNA NAVODILA\*\***

- Pred uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite za morebitno prihodnjo uporabo.
- Ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo ali v vodi (bazeni, savne, itd.).
- Ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.
- Ne prekrivajte svetilke ali je ne uporabljajte, če ste utrujeni.
- Ne glejte neposredno v luč.
- Ne uporabljajte na genitalnem področju.
- Ne uporabljajte med spanjem ali če ste mokri.
- Ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 minut.
- Zaščitite pred udarci in padci.
- Poskrbite, da bo svetilka nameščena na varnem in stabilnem mestu.
- Če med uporabo občutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo svetilke.
- Če ste nanесли kremo ali olje na kožo, morate to območje pokriti.
- Neprekinjeno uporabljajte na enem mestu največ 30 minut.
- Po uporabi odklopite. Ne vlecite za napajalni kabel.
- Naprave ne uporabljajte, če so vaše roke vlažne ali mokre.
- Če čistite svetilko z vlažno krpo, mora biti svetilka pred naslednjo uporabo posušena.

**\*\*OPOZORILO\*\*:** Izdelek ni primeren za nosečnice, otroke, osebe z tumorji, krvavitvami, motnjami strjevanja krvi, opeklinami, poškodovano kožo ali slabim krvnim obtokom.

**\*\*OPOZORILO\*\*:** Izdelek ni primeren za osebe, občutljive na svetlobo, toploto ali občutljivo kožo.

**\*\*TEHNIČNE SPECIFIKACIJE\*\***

Vhodna napetost: 110-240 V, 50 Hz/60 Hz

Nazivna moč: 30 W

Vir svetlobe: LED čipi

Valovna dolžina: 660 nm (rdeča svetloba) in 850 nm (bližnja infrardeča svetloba)

#### ZAŠČITA OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno v najbližji čistilni napravi.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate varovati zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranjevanje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakona ali sankcijam. Ne odlagajte baterij med gospodinjske odpadke, ampak jih predajte na mesto za recikliranje.

#### \*\*OPIS IZDELKA\*\*



1. LED lučke
2. Krmilnik
3. Adapter
4. Zaščita za oči
5. Vrvi
6. Nastavljiva palica
7. Osnova

#### \*\*UPORABA\*\*



1. Gumb za vklop
2. Način
3. Časovnik
4. Intenzivnost
5. Prikazovalnik

#### \*\*1. Gumb za vklop\*\*

Če je svetilka izklopljena, pritisnite gumb za zagon svetilke. Če je svetilka vklopljena, bo pritisk na gumb povzročil utripanje fluorescentne svetilke. Ponovno pritisnite gumb za izklop svetilke.

#### \*\*2. Način\*\*

Svetilka ima 3 načine osvetlitve:  
a. 660 nm + 850 nm LED sevanje

b. 660 nm sevanje

c. 850 nm sevanje

Po zagonu se začne sevanje, s pritiskom na gumb spremenite način.

### **\*\*3. Časovnik\*\***

Časovnik lahko nastavite na 6 nivojev: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min.


Privzeto je brez časovnika. Pritisnite gumb za ciklično nastavitvev časovnika.

### **\*\*4. Intenzivnost\*\***

Izbirate lahko med 5 nivoji intenzivnosti: L0 – L4. Nastavitvev se spremeni ciklično.

### **\*\*PRIKLJUČITEV KABLA\*\***

Kavlje karabinov pritrдите na očesce na svetilki, kot je prikazano na sliki.

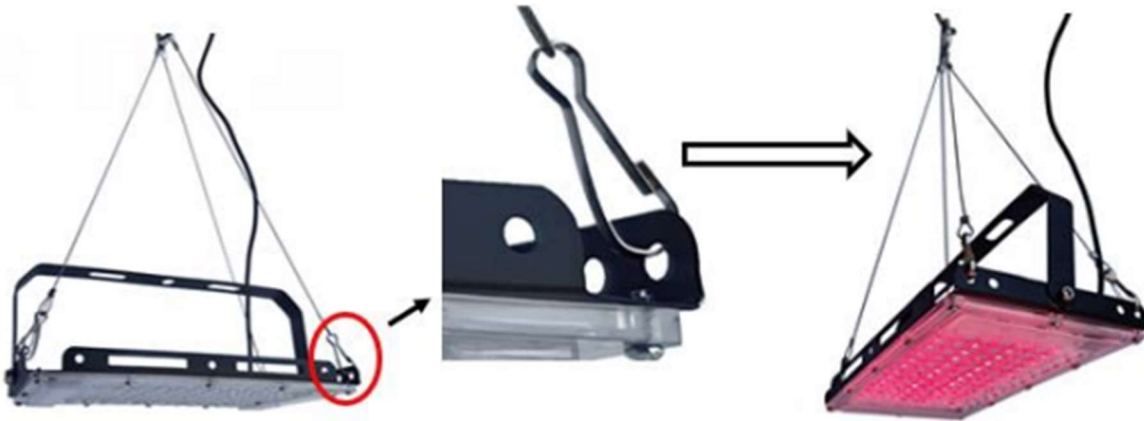

### **\*\*POSTAVLJANJE NA MIZO\*\***

Kot lahko prilagodite z nosilcem na zadnji strani.



### **\*\*STOJALO\*\***

#### **\*\*1. korak\*\***


Odstranite embalažni material in razprite noge stojala. Zavrtite v smeri urinega kazalca, da sprostite stojalo, zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga zategnete.

#### **\*\*2. korak\*\***

Pritrdite svetilko na stojalo. Zavrtite v smeri urinega kazalca, da zategnete svetilko, zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo sprostite. Svetilko priključite na adapter.

#### **\*\*3. korak\*\***

Adapter priključite v električno vtičnico. Izberite način, intenzivnost in trajanje uporabe.

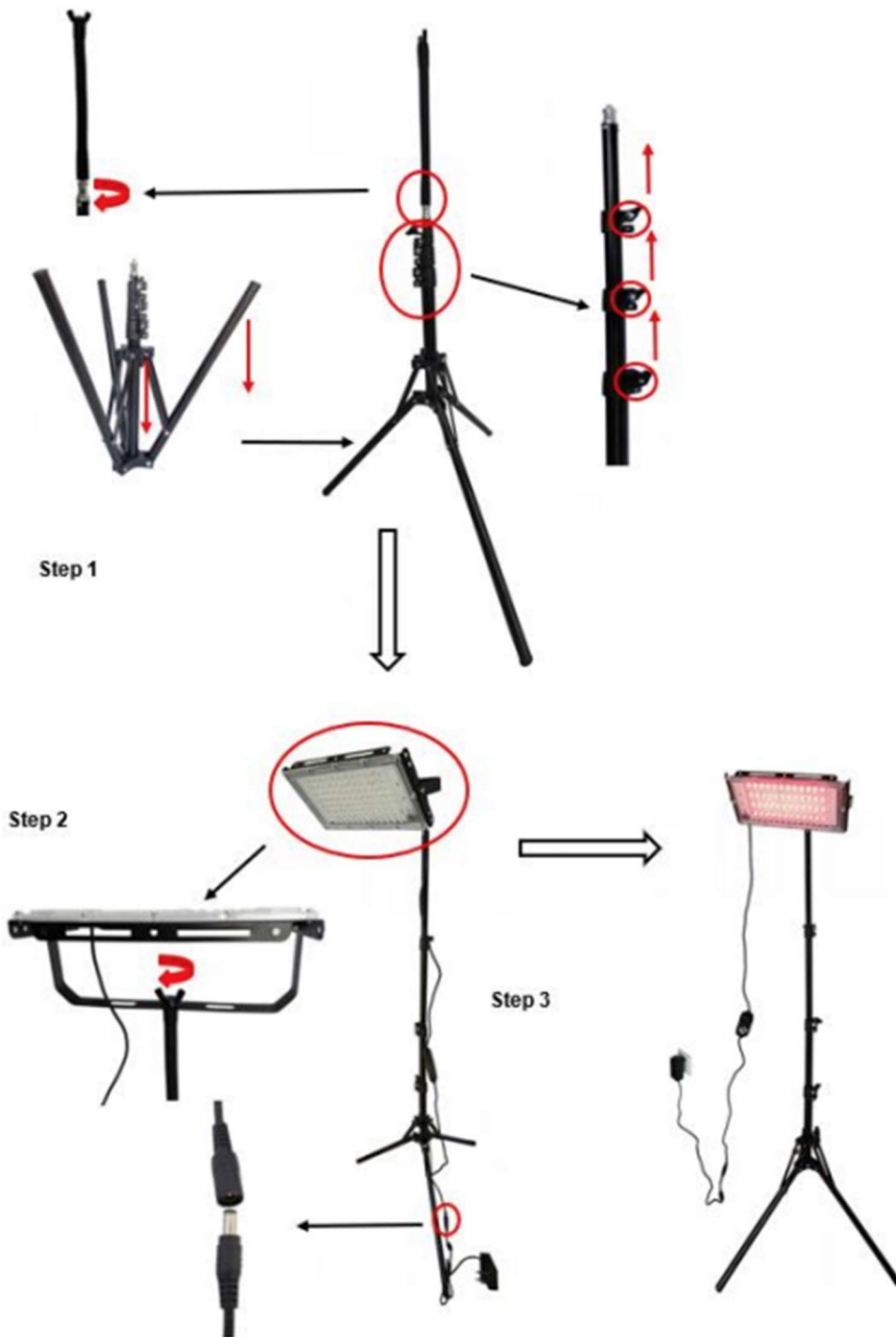

## GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

### Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.