

PRIROČNIK ZA UPORABO – EN
LED svetlobni tunel za obraz inSPORTline Coladome 600 IN24986



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Priročnik shranite za druge uporabnike.
- Druge uporabnike seznanite z osnovnimi varnostnimi navodili in uporabo.
- Napravo lahko uporablja samo izkušena in polnoletna oseba s potrebnim znanjem.
- Pred uporabo se prepričajte, da LED lučke in naprava niso poškodovani.
- Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte na mestih z visoko vlažnostjo (kopalnice, savne, bazeni itd.).
- Uporabljajte samo v dobro prezračenem prostoru.
- Naprava mora biti postavljena na ravno, trdno in stabilno površino.
- Zaščitite napravo pred udarci ali padci.
- Med uporabo ne uporabljajte drugih naprav, ki sevajo toploto.
- Hraniti izven dosega vode.
- Ne vtikajte v poškodovano vtičnico.
- Ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana.
- Po uporabi napravo izključite iz električnega omrežja. Za vzdrževanje in čiščenje napravo izklopite.
- Če voda pride v napravo, jo takoj izključite iz električnega toka.
- Če naprava oddaja neobičajne zvoke ali vonjave, takoj prenehajte z delovanjem in napravo izključite iz električnega omrežja.
- Naprave ne spreminjajte ali popravljajte sami.
- Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v priročniku. Kakršna koli druga uporaba ni dovoljena.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote ali odprtega ognja.
- Med uporabo ne prekrivajte s krpo ali drugimi predmeti.
- Napravo čistite samo s suho krpo.
- Ne uporabljajte, če imate kožne bolezni, težave s srcem, visok krvni tlak, razdraženo ali občutljivo kožo.
- Vedno nosite zaščitna očala!
- Priporočena delovna temperatura: 0 - 26 °C
- Priporočena temperatura skladiščenja 0 - 35 °C

- Relativna vlažnost: <80%
- Pogostost uporabe: lahko se uporablja 25-30 minut na dan en mesec ali po katerem koli kozmetičnem posegu. V sklopu zdravljenja aken priporočamo uporabo 3x tedensko, vsaj 25 minut.

OPIS IZDELKA



Ob redni uporabi lučke delujejo kot razkužilo in s kože odstranijo neželene bakterije.

MONTAŽA




Povežite stranske plošče z zgornjo ploščo (nadzorno ploščo)

PRED PRVO UPORABO


Pred uporabo se prepričajte, da je okoli naprave dovolj prostega prostora in dovolj blizu vtičnice. Izogibajte se mestom z visoko vlažnostjo ali neposredno sončno svetlobo.

Napravo postavite na ravno, trdno in stabilno površino in jo priključite na električni tok.

UPORABA

Po vstavitvi vtičnika v napravo držite gumb za vklop .
Nato lahko nastavite posamezne funkcije.


Luči

Pritisnite gumb MODE  in izberite LIGHT - SVETLOBA, indikator začne utripati in z gumboma + in - lahko prilagodite intenzivnost svetlobe (25%, 50%, 75%, 100%)

Čas

Pritisnite gumb MODE izberite TIME - ČAS, indikator bo začel utripati in z gumboma + in - lahko nastavite čas delovanja (minimalni čas delovanja je 25 min, vsak nadaljnji del podaljša čas delovanja za 5 min do največ 60 min.)

Temperatura

Pritisnite gumb MODE  in izberite TEMP, indikator bo začel utripati in z gumboma + in - lahko nastavite temperaturo (minimalna temperatura je 40 °C, najvišja temperatura 75 °C)


Barvne luči

Na izbiro je 8 vrst luči: rdeča, zelena, modra, rumena, vijolična, oranžna, svetlo zelena in barvni cikel.

Če želite spremeniti barvo, pritisnite gumb za vklop.

Po preteku nastavljenega časa se naprava izklopi.

Po uporabi napravo izključite iz električnega omrežja.

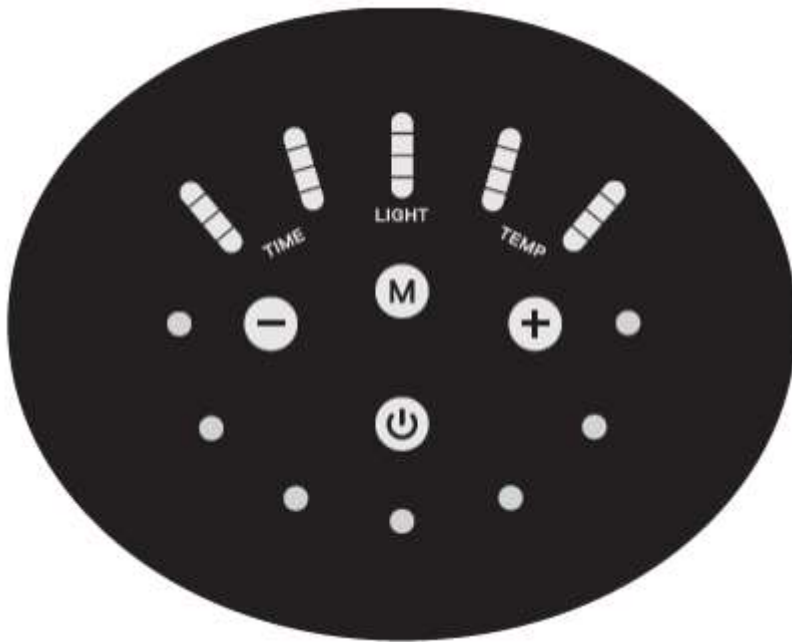

SVETLOBNA TERAPIJA

Rdeča

Povečan pretok krvi in proizvodnja kolagena. Pomaga pri obnovi tkiva (zamenjava starih kožnih celic z novimi) in zmanjšanju por.

Zelena

Pomaga uravnesiti barvo pigmenta, pospešiti regeneracijo kože in zmanjšati mastenje.

Modra

Pomirjujoče, protivnetno, uničuje kožne bakterije.

Rumena/oranžna

Energizira kožo, pomaga zmanjšati gube, uravnesiti barvo pigmenta in zgladiti kožo.

Vijolična

Pomaga pri preprečevanju aken.

VZDRŽEVANJE

- Okvir naprave obrišite s suho in mehko krpo.
- Napravo hranite na suhem, senčnem mestu.
- Razstavite napravo za shranjevanje.

OPOZORILO: Pred vzdrževanjem in shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena iz električnega omrežja. V primeru okvare ali poškodbe se obrnite na servis / reklamacijski oddelek.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Narejeno	Kitajska
Napajanje	DC 12V, 4A, 50 Hz / 60 Hz
LCE	Rdeča, modra, zelena
Dimenzije	495 x 215 x 295 mm
Teža	2,5 kg ± 10%

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognejo kršitvi zakona ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.