




NAVODILA ZA UPORABO – SLO

IN 21961 Masažna pištola inSPORTline Rondys

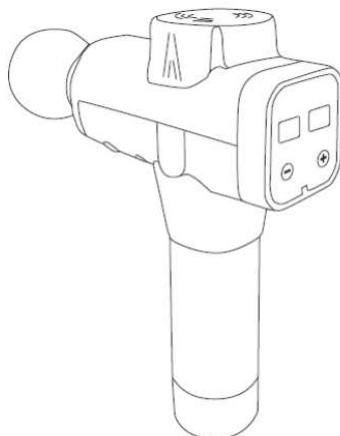


VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Ne potopite v vodo. Hranite ločeno od vode in virov toplote.
- Prezračevanje mora biti vedno čisto.
- Naprava ne more neprekinjeno delovati več kot 1 uro. Po 30 minutah delovanja je priporočljivo, da se naprava ohladi.
- Po polnjenju odklopite polnilnik.
- Samo za odrasle.
- Ne uporabljajte na poškodovani ali občutljivi koži.
- Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Uporabljajte samo na suhi koži in nad lahкими oblačili.
- Uporabljajte le 60 sekund na vsakem delu telesa.
- Uporabljajte samo na mehkih delih telesa, ne uporabljajte na kosteh ali trdih delih telesa.
- Masaža mora biti neboleča in udobna.
- Uporabite masažno glavo, ki najbolj ustreza temu namenu.
- Med uporabo lahko pride do modric, pogosto preverjajte masirano mesto.
- Če začutite bolečino, takoj ustavite masažo.
- Prsti, lase in drugi deli telesa naj bodo stran od zadnje strani naprave.
- V luknje ne vstavljajte predmetov.
- Izogibajte se tresenju in udarcem pištole.
- Preverite stanje izdelka pred in po uporabi.
- Izdelka ne spreminjajte.
- Naprave nikoli ne puščajte v polnilniku ali med delovanjem brez nadzora.
- Ni primeren za ljudi, občutljive na vibracije.
- Uporabljajte samo originalni polnilnik.
- Naprava se samodejno izklopi po 15 minutah uporabe.

- Ni primeren za ljudi z zmanjšanimi motoričnimi sposobnostmi, duševnimi ali telesnimi boleznimi, pomanjkanjem izkušenj in znanja. Te osebe smejo uporabljati aparat samo pod nadzorom odrasle osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Ni primerno za: nosečnice, ljudi s sladkorno boleznijo, nevropatijo, poškodbo mrežnice, epilepsijo, migreno, hernijo diska, spondilolistezo, spondilolizo; za uporabnike srčnega spodbujevalnika, po nedavni operaciji, po zamenjavi sklepov, s kovinskimi ploščicami.
- Napravo uporabljajte le po posvetovanju z zdravnikom.

OPIS IZDELKA

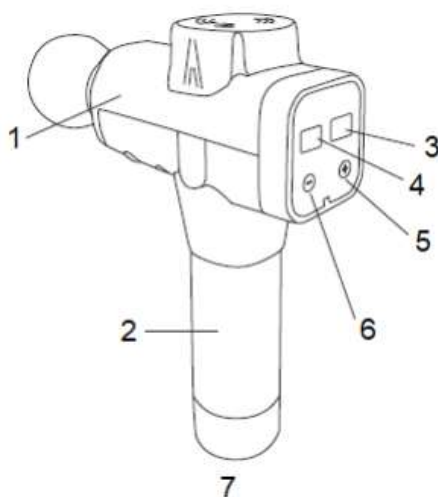

1.	Glavni del
2.	Baterija in ročaj
3.	Status baterije
4.	Prikaz hitrosti
5.	Hitrost +
5.	Hitrost -
6.	Gumb za vklop / izklop

Uporaba

Baterijo varno pritrdite na podstavek. Napravo vklopite tako, da vklopite stikalo za vklop na dnu baterije. Napravo izklopite tako, da izklopite stikalo za vklop. Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumba + / - za povečanje ali zmanjšanje hitrosti. Za zaustavitev naprave pritisnite eno od tipk za 3 sekunde. Izklopite stikalo za akumulator v položaj za izklop, zaslon se bo izklopil. Naprava se samodejno izklopi po 10 minutah neprekinjene uporabe.

PONOVNO POLNJENJE

Popolno polnjenje baterije pred prvo uporabo lahko traja do 6 ur.

Če želite polniti, priključite polnilnik na vhod za polnjenje in ga priključite v vtičnico.

Zaslon baterije prikazuje stanje baterije, če je vrednost 20, napolnite baterijo. Ni priporočljivo, da se baterija popolnoma izprazni.

VAROVANJE OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neučinkovito, ga zavržite v skladu z navodili lokalnih zakonov ter okolju prijazno v najbližjem odlagališču. S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagata varovati zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje odpadkov, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvi zakonov ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, ampak jih oddajte na pravo mesto za recikliranje.